



Manual de Instruções


**CHASSIS RADIOGRÁFICO
KIRAN LUMAX**

Descrição do Produto

Os chassis radiográficos **KIRAN** são destinados ao carregamento de filmes de raio-x e telas intensificadoras de imagem (écran), para procedimentos radiográficos.

Composição do Produto

São constituídos de duas placas de alumínio, unidas entre si por uma cantoneira com dobradiças flexíveis de alumínio e de um sistema de trava plástica para fechamento. O modelo (com janela em polietileno) possui uma abertura embutida para que os dados do paciente sejam impressos diretamente no filme, em luz ambiente.

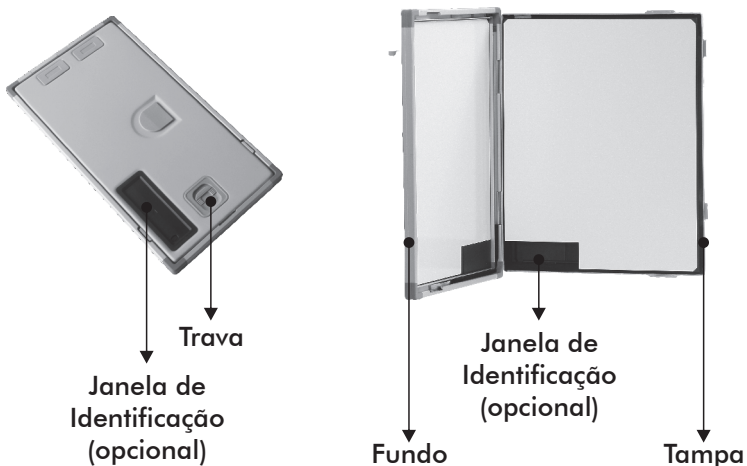


Apresentações disponíveis:

Modelo	Tamanho (cm)
Chassis com janela de identificação	15 x 30 15 x 40 18 x 24 20 x 25 24 x 30 30 x 40 35 x 35 35 x 43 35 x 91
Chassis sem a janela de identificação	13 x 18 15 x 30 15 x 40 18 x 24 20 x 25 24 x 30 30 x 40 35 x 35 35 x 43 35 x 91

Colagem dos Écrans



Verifique se as superfícies onde os écrans serão colados (tampa e fundo do chassis) estão limpas (Fig.1).

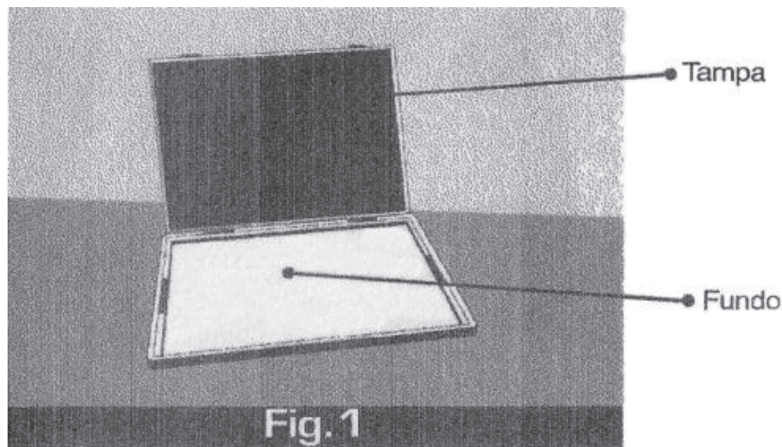

Dependendo da marca, poderá haver distinção entre o écran que será colado no fundo e na tampa do chassis. Isso será confirmado verificando se, no verso dos écrans, existe a legenda front ou back.

Durante todo o processo de colagem, mantenha a parte frontal dos écrans protegida pelo papel que acompanha a embalagem, já que qualquer dano ou sujeira acarretará em manchas no filme.



Selecione o écran com a legenda back (se houver) e posicione-o no fundo do chassis com a face voltada para baixo. Retire o decalque dos adesivos (Fig. 2) e certifique-se de que o écran está centralizado em relação ao chassis.

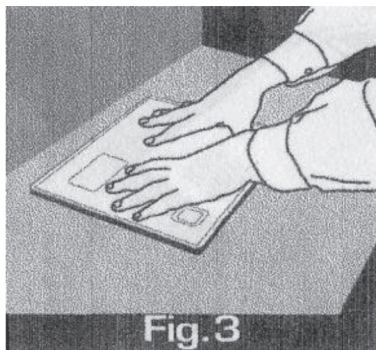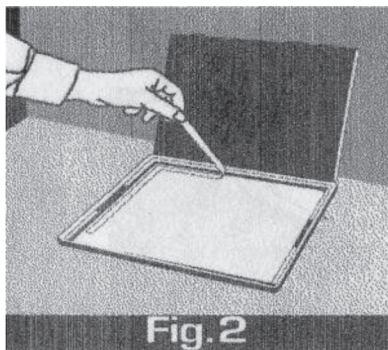

Feche o chassis com cuidado, até o travamento, pressionando a tampa com as mãos para reforçar a colagem (Fig. 3).

Abra novamente o chassis e, utilizando um papel como proteção, pressione as bordas dos écrans finalizando a colagem.

Posicione o outro écran, agora na tampa, com a face voltada para baixo, alinhando-o com o primeiro écran já colocado.


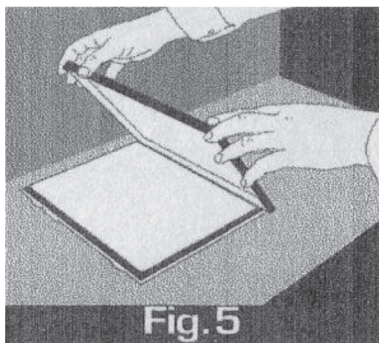
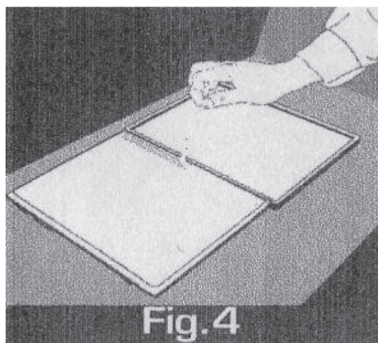


Retire o decalque dos adesivos (Fig. 4) e, com cuidado, feche o chassis deixando a tampa voltada para baixo (Fig. 5), até o travamento.

Da mesma forma, pressione a tampa e abra o chassis, pressionando as bordas para finalizar a colagem.

Siga as instruções de limpeza e conservação dos écrans de acordo com a recomendação do fabricante.



Carregamento do Filme

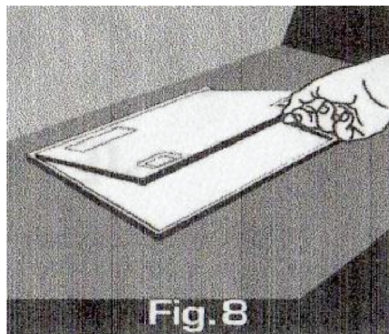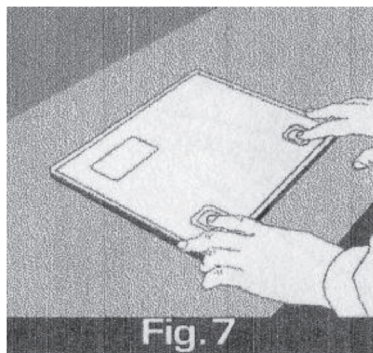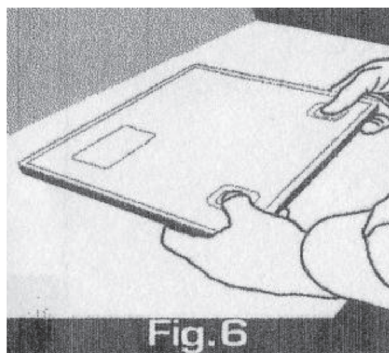

Na câmara escura, coloque o chassi sobre uma mesa ou bancada.

Abra o chassi pressionando a trava (Fig. 6 ou Fig. 7) e levantando a tampa através do puxador (Fig. 8).



Posicione o filme (Fig. 9) e feche a tampa até o travamento.

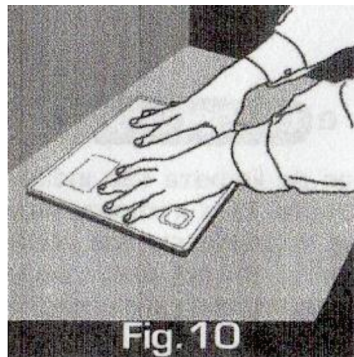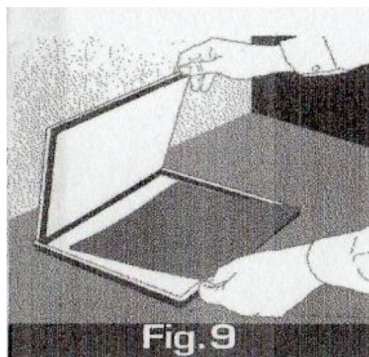

Pressione a tampa para expulsar o ar que fica entre o filme e os écrans (Fig. 10).

Descarregamento do Filme

Abra o chassis e vire-o de modo que a tampa fique virada para baixo (Fig. 11)

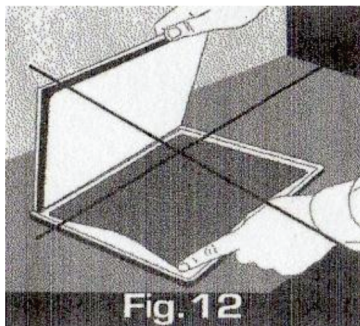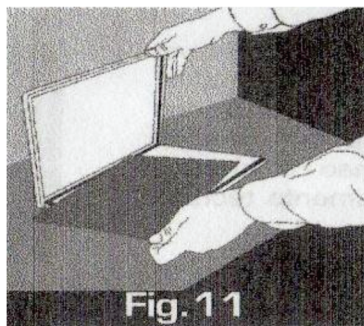

Não retire o filme puxando-o pela ponta (Fig. 12), pois essa operação repetidas vezes irá desgastar a camada protetora do écran, gerando artefatos e manchas nas radiografias.

Limpeza e Conservação

As instruções de limpeza são indicadas para a parte externa do chassi. Para a limpeza da parte interna, siga as instruções do fabricante dos écrans.

Para limpeza do chassi, utilize pano umedecido em água e sabão, completando a secagem com pano seco.

Garantia

O chassi radiográfico **LUMAX** possui garantia de um ano contra defeitos de fabricação detectados no período. Excetua-se dessa garantia danos causados por mau uso ou acidentes. Não nos responsabilizamos por danos causados nos écrans. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo telefone ou e-mail.

Fabricante: Kiran Medical Systems

303-A, Kiran Chambers - Linking Road - Khar - Mumbai 400052 - India

Importador: Controller Comércio e Serviço Ltda.

Av. Santa Catarina, 1481 - Florianópolis - SC -

CEP 88075-500 - CNPJ: 78.515.210/0001-00

Fones: 11 4063-0023 | 31 4063-9244 | 48 3248-2828

E-mail: sac@controller-sc.com.br

Site: www.controller-sc.com.br

Responsável Técnico: Diógenes Borges - CRF/SC 1117

Registro da ANVISA: 10410130017